


BEDIENUNGSANLEITUNG

Atem Alkohol Tester mit Digitalanzeige

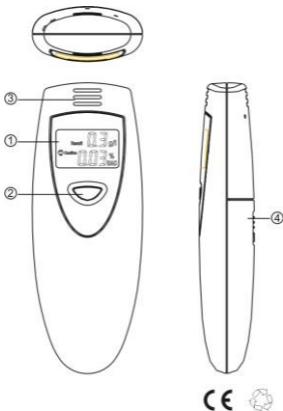

(1) LCD Anzeige

(2) ON/OFF Knopf

(3) Ateminhalator


(4) Batteriefach

Merkmale

1. Atem Alkoholtest mit akustischer Warnung
2. Erfassungsbereich 0,00-0,19% BAC und 0,0-1,9g/l (oder 0,00-0,95mg/l BRAC)
3. Schnelles Ansprechen und Ergebnis
4. Automatisches Ausschalten
5. Betrieb mit 2 x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Herunterschieben des Deckels.

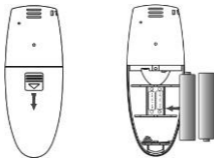

2. Legen Sie zwei 1,5V AAA Batterien ein und achten dabei auf die korrekte Polung wie im Batteriefach abgebildet.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Verwendung des Alkoholtesters

Vorbereitung:

1. Drücken Sie den ON/OFF-Knopf (2) einmal → die Anzeige (1) schaltet sich ein und ein Signalton ertönt.
2. Auf dem Display erscheint das „**Warm up**“ Symbol und ein Countdown zählt von 10 bis 0 herunter → der Tester befindet sich nun im Vorbereitungsmodus.




HINWEIS

Beim erstmaligen Entnehmen aus der Verpackung oder nach einem längeren Nichtgebrauch des Alkoholtesters befinden sich eventuell viele Gase und Luftverunreinigungen auf dem Ateminhalator, in diesem Fall benötigt der Tester eine mehrfache Vorbereitungsphase, bitte drücken Sie hierfür öfter den ON/OFF-Knopf (2).

Verwendung:

1. Auf dem Display erscheint das „**Blow**“ Symbol und ein Countdown zählt von 10 bis 0 herunter → der Alkoholtester ist nun bereit.

2. Blasen Sie anschließend für ca. 3-5 Sekunden in den Ateminhalator (3). Anschließend können Sie das Testergebnis ablesen.

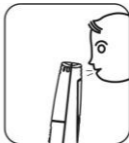

3. Bei Erreichen eines Wertes von 0,02% BAC (oder 0,2g/l) bis 0,05% (oder 0,5g/l) erscheint zusätzlich das „**Caution**“ Symbol auf der Anzeige:




4. Bei Erreichen eines Wertes von 0,05% BAC (oder 0,5g/l) oder mehr erscheint zusätzlich das „**Danger**“ Symbol auf der Anzeige:



Automatisches Ausschalten

1. Das Testergebnis wird für ca. 15 Sekunden angezeigt, anschließend erscheint das „Off“ Symbol für 2-3 Sekunden auf dem Display und der Tester schaltet sich automatisch aus.

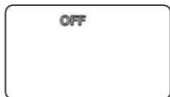

2. Wenn während eines laufenden Testes nicht in den Ateminhalator geblasen wird zeigt das Display „0,00“ als Testergebnis.

HINWEIS

Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir den Test 2-3mal durchzuführen.


Anzeige Batterie erschöpft „L“

Wenn das „L“ Symbol beim Einschalten blinkt, sind die Batterien erschöpft, bitte tauschen Sie diese aus.

Tauschen Sie die Batterien spätestens dann aus, wenn deren Kapazität nicht mehr zum Einschalten und Vorbereiten ausreicht.

Handschlaufe

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Schlaufe gemäß folgender Abbildung:

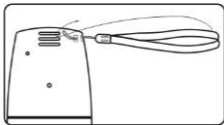

Spezifikationen

- Erweiterter Halbleiter Sauerstoff Alkohol Sensor
- Erfassungsbereich 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9g/l (oder 0,00-0,95mg/l BRAC)
- Genauigkeit: 0,01% BAC (0,1g/l)
- Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA Batterien
- Vorbereitungszeit → 10 Sekunden
- Testergebnis → 5 Sekunden
- Automatisches Ausschalten: Nach ca. 35 Sekunden
- Abmessungen: 95 x 36 x 18mm

WICHTIGER HINWEIS

Weder der Hersteller noch der Importeur übernehmen Haftung für unkorrekte Messangaben und Folgen, die sich aus falschen Messwertangaben ergeben, da der Alkoholtester kein amtliches Messgerät ist und ausschließlich dazu benutzt werden sollte, um eine grobe Alkoholkonzentration im Körper zu ermitteln. Da viele Faktoren, wie Gasrückstände in der Luft, Rauch oder verschiedene Gerüche im menschlichen Mund die Messung der Atem-Alkoholkonzentration beeinflussen, können die Werte immer nur ein grobes Indiz sein! Wir empfehlen daher nach dem Essen, Trinken oder dem Rauchen einer Zigarette ca. 20 Minuten zu warten.

GERÄT ENTSORGEN

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie daher das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Weise entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Simon Deutsch
G. DEUTSCH GMBH & CO. KG
NAUF-GRÖSSTHANDEL
SUD-WEIN- & SAUKNUTZUNGEN
TEL. 01 / 533 75 72 BERG, FAX. 01 / 533 96 72
E-MAIL: s.deutsch@simon-deutsch.com

EG Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Simon Deutsch GmbH&CoKG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet und folgenden Normen angewendet wurden
EN61000-6-3:2007+A1:2011 und EN61000-6-1:2007.

Simon Deutsch
G. DEUTSCH GMBH & CO. KG
NAUF-GRÖSSTHANDEL
SUD-WEIN- & SAUKNUTZUNGEN
BUND: 1010 WIEN FLEISCHMARKT 7/TÜR 3-4
TEL. 01 / 533 75 72 BERG, FAX. 01 / 533 96 72
E-MAIL: s.deutsch@simon-deutsch.com