


# Atem Alkohol Tester mit Digitalanzeige

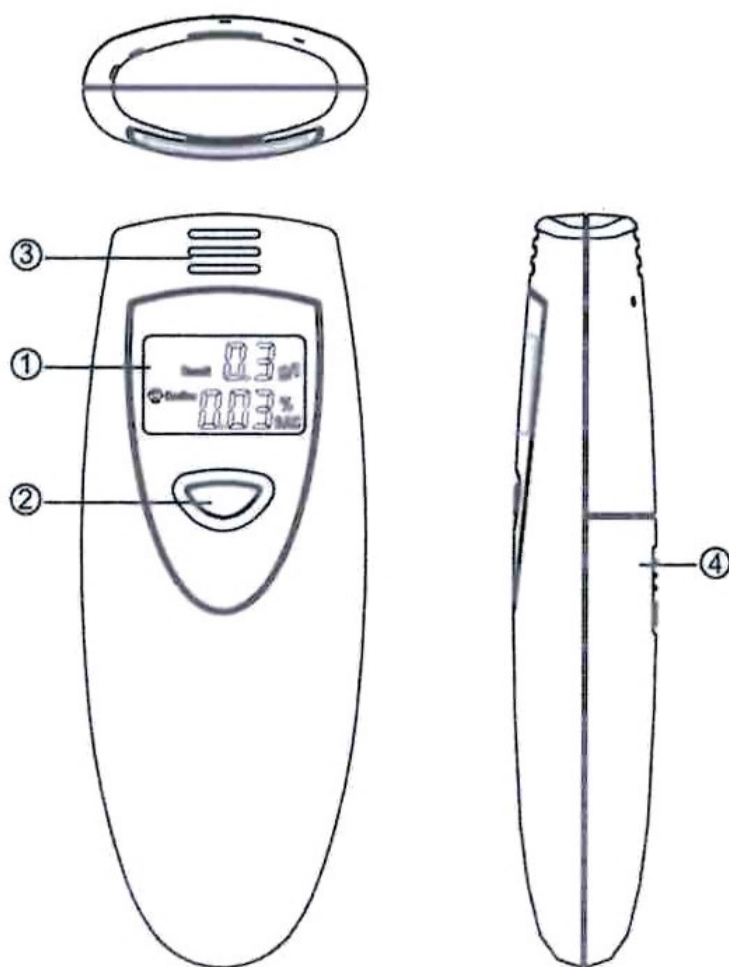


- (1) LCD Anzeige    (2) Einschalter  
(3) Ateminhalator    (4) Batteriefach

## **Merkmale**

1. Atem Alkoholtest mit akustischer Warnung
2. Erfassungsbereich 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9g/l
3. Schnelles Ansprechen und Ergebnis
4. Automatisches ausschalten
5. Betrieb mit 2 x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)

## **Einlegen der Batterien**

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Herunterschieben des Deckels.

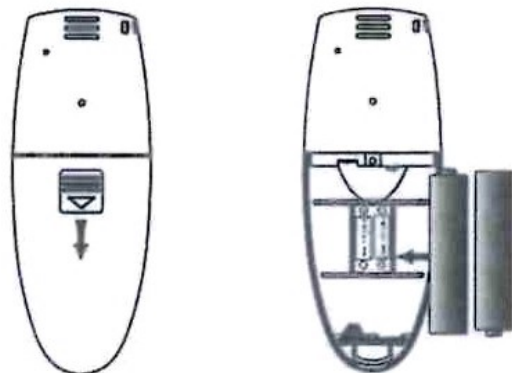

2. Legen Sie zwei 1,5V AAA Batterien ein, achten Sie hierbei auf die korrekte Polung, wie im Batteriefach abgebildet.
3. Schließen Sie das Batteriefach

## **Verwendung des Alkoholtesters**

### Vorbereitung

1. Drücken Sie den Einschalter einmal, die Anzeige schaltet sich ein und ein Signalton ertönt.




2. Auf dem Display erscheint das „Warm up“ Symbol und ein Countdown zählt herunter von 10-0, der Tester ist im Vorbereitungsmodus.

### Hinweis

Beim erstmaligen Entnehmen aus der Verpackung oder nach einem längeren Nichtgebrauch des Alkoholtesters befinden sich eventuell viele Gase und Luftverunreinigungen auf dem Ateminhalator, in diesem Fall benötigt der Tester eine mehrfache Vorbereitungsphase, bitte drücken Sie hierfür öfter den Einschalter.

### Verwendung

1. Auf dem Display erscheint das „Blow“ Symbol und ein Countdown zählt herunter von 10-0, der Tester ist bereit.

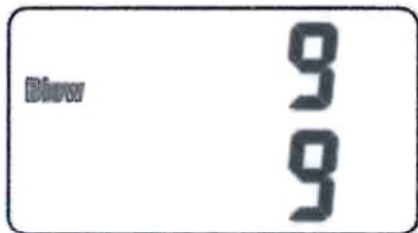

2. Nähern Sie sich mit Ihrem Mund dem Ateminhalator und blasen Sie für ca. 3-5 Sekunden in diesen.

3. Lesen Sie das Testergebnis ab.

4. Bei Erreichen eines Wertes von 0,02% BAC (oder 0,2g/l) bis 0,05% (oder 0,5g/l) erscheint zusätzlich das „Caution“ Symbol in der Anzeige:

- 0.02% BAC(or 0.2g/l) to 0.05% BAC(or 0.5g/l).
- 0.05% BAC(or 0.5g/l) to 0.08% BAC(or 0.8g/l).




5. Bei Erreichen eines Wertes von 0,05% BAC (oder 0,5g/l) oder mehr erscheint zusätzlich das „Danger“ Symbol in der Anzeige:

- over & equal 0.05% BAC(or 0.5g/l).
- over & equal 0.08% BAC(or 0.8g/l)

### Automatisches Ausschalten

1. Das Testergebnis wird für ca. 15 Sekunden angezeigt, anschließend erscheint das „Off“ Symbol für 2-3 Sekunden und der Tester wird ausgeschaltet.

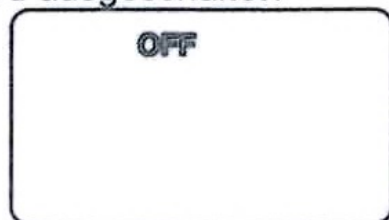

2. Wenn während eines laufenden Testes nicht in den Ateminhalator geblasen wird zeigt das Display 0,00 als Testergebnis.

Hinweis

Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, den Test 2-3mal durchzuführen.


## Anzeige Batterie erschöpft

Wenn das „L“ Symbol beim Einschalten blinkt, sind die Batterien erschöpft, bitte tauschen Sie diese aus.

Tauschen Sie die Batterien spätestens dann aus, wenn deren Kapazität nicht mehr zum einschalten und vorbereiten ausreicht.

## Handschlaufe

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Trageband gemäß folgender Abbildung

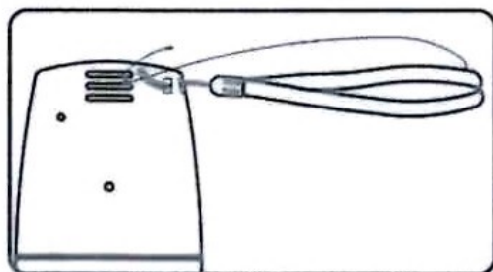

## Spezifikationen

- \* Sensor : Erweiterter Halbleiter Sauerstoff Alkohol Sensor
- \* Erfassungsbereich 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9g/l
- \* Genauigkeit : 0,01% BAC (0,1g/l)
- \* Stromversorgung : 2 x 1,5V AAA Batterien.
- \* Vorbereitungszeit 10 Sekunden, Testergebnis < 5 Sekunden.
- \* Automatisches Ausschalten nach ca. 35 Sekunden.
- \* Abmessungen : 95 x 36 x 18mm.

## Precaution

-- When after drinking, it is recommended to last after 20 minutes, it is because 20 minutes is approximately for alcohol to be absorbed into blood from the digestive organs, and residual alcohol remaining in the mouth takes this long to dissipate.